




व्हेटर्नरी डायग्नोस्टिक सेंटर
अचूक निष्कर्ष; प्राण्यांचा उत्कर्ष



LK Vet Care Pvt. Ltd.
॥ पशुसंपन्नतार्थम् तंत्रोपासना ॥

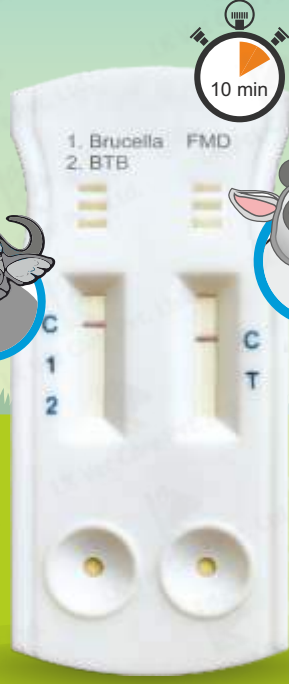

केवळ 10-15 मि.
थेट गोठ्यात जनावरांची
सहज सोपी रक्त/सीरम
तपासणी करता येते



ब्रूसेला तपासण्यासाठी
ब्रूसेला टेस्ट किट

ब्रूसेला टेस्ट किट परिचय :

बोवाइन ब्रूसेला अँटीबॉडी रॅपिड डिटेक्शन टेस्ट किट, हे गुरांमध्ये असलेला ब्रूसेला संसर्ग शोधण्यासाठी तयार केलेले आहे. सदर किट शेतकरी, पशुवैद्य किंवा LSS यांना वापरण्यास सोयीस्कर आणि सोपे आहे. ब्रूसेला चाचणी जलद आणि पूर्णपणे किफायतशीर आहे. ज्यामुळे रोग ओळखण्यास आणि त्यावर लवकर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होते.

वैशिष्ट्ये :



प्राण्यांमधील ब्रूसेला व्हायरस संक्रमण
आणि त्यांच्या प्रजाती अचूकपणे ओळखते.



ब्रूसेला चाचणी कमीत कमी
रक्तनमुन्यामध्ये होते.



पारंपारिक पद्धतीच्या तुलनेत ब्रूसेला टेस्ट किट
चाचणी सर्वोत्तम आणि किफायतशीर आहे.



चाचणीसाठी लॅब किंवा इतर कोणत्याही
उपकरणाची आवश्यकता नाही.

फायदे :



केवळ 10 -15 मिनिटांत टेस्ट रिझल्ट दर्शविते



कमी आर्थिक
गुंतवणूक



पोर्टेबल किट
वापरण्यास सोपे



प्राण्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यास उपयुक्त



कोल्ड स्टोरेजची
आवश्यकता नाही



आर्थिक नुकसान
टाळण्यास मदत

Tap to Visit :

@ lkvetcare.in

@ info@lkvetcare.in

f pashulab

ब्रूसेला टेस्ट किटचा अभिप्रेत वापर :

- बोवाइन ब्रूसेला अॅबोर्टस अँटीबॉडी रॅपिड टेस्ट हे गुरांमधील ब्रूसेला अँटीबॉडीज शोधण्यासाठी वापरले जाणारे साधन आहे. हे इम्युनोक्रोमॅटोग्राफी नावाची पद्धत वापरून कार्य करते. ज्यामध्ये गुरांचे संपूर्ण रक्त, प्लाझमा किंवा सीरमचे नमुने तपासले जातात. ज्याद्वारे प्राण्यांमध्ये ब्रूसेला अँटीबॉडीज आहेत की नाहीत हे निर्धारित केले जाते.

सारांश आणि चाचणी वर्णन :

- बोवाइन ब्रूसेलोसिस हा एक आजार आहे ज्यामुळे गुरांमध्ये गर्भपात होतो. हा जीवाणू गाई, म्हैस प्राण्यांना देखील संक्रमित करू शकतो. काही प्राणी जीवाणूंचे प्रसारक म्हणून काम करू शकतो. काही प्राणी जीवाणूंचे प्रसारक म्हणून काम करू शकतात, ज्यामुळे गुरांमध्ये रोग नियंत्रित करणे कठीण होते.
- बोवाइन ब्रूसेला रॅपिड टेस्ट अँटीबॉडीज शोधण्यासाठी डिझाइन केली जाते. ज्यामध्ये कोलोइडल गोल्ड कंजुगेटेड डिटेक्शन अँटीबॉडी नावाची पद्धत वापरली जाते. गुरांमधील अँटीबॉडीज शोधून ब्रूसेला एबोर्टस संसर्ग लवकर ओळखण्यास मदत करते. ज्यामुळे रोग नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजना करता येतात.
- संक्रमित प्राण्यांच्या संपर्कातून, ब्रूसेला अॅबोर्टसमुळे मानवांना संसर्ग होऊ शकतो. तसेच, दूषित दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने देखील संसर्ग होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे मानवांच्या विविध अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो.

तपशील आणि वापर :

आढळलेले परजीव	ब्रूसेला एबोर्टस, मेलिटॅन्सिसचे आयजीजी अँटीबॉडीज
शेल्फ लाइफ	24 महिने
कॅप्चर प्रतिजन	शुद्ध एलपीएस प्रतिजन
प्रतिजन विशिष्टता	99.10%
प्रजाती	बोवाइन, ओवीन आणि कॅप्रिन

नमुना प्रकार	संपूर्ण रक्त, सीरम, प्लाझमा
स्टोरेज	2-30°C
संवेदनशीलता	96.80%
चाचणीची तुलना	पूरक निर्धारण चाचणी
पॅकिंग	10 टेस्ट बल्क अनकट शीट्स

चाचणीसाठी नमुना कसा घ्यावा :

1 कान टोचून रक्त-नमुना गोळा करणे

2 ड्रॉपरमध्ये 10µl नमुना घ्या

3 कॅसेटमध्ये 10µl नमुना सोडा

10 मि. प्रतीक्षा करा (बफरसाठी-2 थेंब)

परीक्षण व्याख्या :

पॉझिटिव्ह

नेगेटिव्ह

इनव्हॅलिड

न्यू कॅसेट

चाचणी किट मध्ये समाविष्ट गोष्टी:

- फॉइल पाउच (१०-नग) - १) चाचणी कॅसेट २) ड्रॉपर ३) डेसिकॅंट ४) परख डायल्यूट-ड्रॉपर बाटली ५) सूचना पत्रक



ब्रूसेला टेस्ट किट खरेदीसाठी - संपर्क: एलके व्हेट केअर प्रा. लि., 3 ए, रचना अॅव्हेन्यू, एफ सी रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे - 9552524949 **येथेही उपलब्ध :** ● पंढरपूर पशुलॅब: वक्रतुंड बिल्डिंग, केबीपी कॉलेज चौकाजवळ, वाखरी रोड, पंढरपूर - 895621065 ● कामधेनु पशुलॅब: हर्षवर्धन कॉम्प्लेक्स, जत-सांगली रोड, डफळापूर - 9923209965 ● बारामती पशुलॅब: मोतानगर समोर, सूर्यनगरी, सिटी इन चौकाजवळ, MIDC, बारामती - 8297111213