



व्हेटर्नरी डायग्नोस्टिक सेंटर  
अचूक निष्कर्ष; प्राण्यांचा उत्कर्ष



LK Vet Care Pvt. Ltd.  
॥ पशुसंपन्नतार्थम् तंत्रोपासना ॥



केवळ 15-20 मि.  
थेट गोठ्यात जनावरांची  
सहज सोपी रक्त/सीरम  
तपासणी करता येते

प्रेग्नन्सी तपासण्यासाठी  
28-डेज रॅपिड व्हिज्युअल  
प्रेग्नन्सी किट

## व्हिज्युअल प्रेग्नन्सी किट परिचय :

बोवाइन प्रेग्नन्सी रॅपिड टेस्ट किट हे गुरांसाठी PAG आधारित डिझाईन केलेली, रक्त गर्भधारणा चाचणी आहे. सदर चाचणी प्रजनन केल्या पासून 28 दिवसांनंतर केव्हाही, गार्ड-म्हैस यांचे होल् ब्लड, सीरम किंवा प्लाझ्मा नमुने घेऊन केवळ 15-20 मिनिटांत डिटेक्ट करून प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो शिवाय ह्या चाचणीचे अध्ययन सोप्या प्रक्रियेमुळे पशुवैद्यकांना, उपचार आणि रोग प्रतिबंधकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येते तसेच शेतकऱ्यांना खात्रीशीर मार्गदर्शन मिळते.

## वैशिष्ट्ये :



ब्रीडिंगनंतर 28 व्या दिवसापासून पुढे  
कधीही अचूक प्रेग्नन्सी टेस्ट करता येते



होल् ब्लड, सीरम व प्लाझ्मा नमुने वापरून  
केवळ 15-20 मिनिटात रिझल्ट दर्शवते



व्हेटर्नरी लॅब शिवाय थेट गोठ्यात-शिवारात  
सहज तपासणी करता येते



प्रेग्नन्सी टेस्टसाठी इतर कोणत्याही  
उपकरणाची आवश्यकता नाही



गुरांमधील गर्भधारणा निश्चित करण्यासाठी  
डिझाईन केलेले विश्वसनीय किट



वापरायला सहज-सोपे, किफायतशीर,  
आणि जलद परिणाम देत



टेस्ट स्ट्रिपच्या कलर-कोडेड रेषांच्या  
आधारे परिणाम समजतो



रेकटल पॅल्पेशनपेक्षा सुरक्षित आणि  
अल्ट्रासाऊंड उपकरणांपेक्षा कमी त्रासदायक

Tap to Visit :

@lkvetcare.in

@info@lkvetcare.in

f pashulab

## फायदे :



**सुधारित प्रजनन कार्यक्षमता**

: गर्भधारणा लवकर ओळखून निरर्थक गर्भाधारणाची शक्यता कमी करते आणि गर्भधारणा प्रणालीस उपयुक्त ठरते.



**गर्भधारणा नसलेला कालावधी**

: गर्भवती न राहिलेल्या गाई-म्हैशी ओळखते आणि दूधाच्या उत्पन्नाची क्षमता वाढवले जाऊ शकते.



**पैश्यांची बचत**

: खाद्य, आरोग्यसेवा आणि गर्भधारीत नसलेल्या गुरांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मजुरीच्या खर्चावर बचत करण्यास मदत होते.



**अनुवंशिक सुधारणा**


: लवकर गर्भधारणा ओळखून प्रजनन निर्णयास सक्षम करता येते. शिवाय अनुवंशिक वैशिष्ट्यांनुसार निवड केल्यामुळे कळपाचे दीर्घकालीन मूल्य वाढवते.

## तपशील आणि वापर :


मथोडोलॉजी	प्रेग्रन्सी असिस्टेड ग्लायकोप्रोटीन (PAG बेस्ड)
शेल्फ लाइफ	12 महिने
संवेदशीलता	99.00%
प्रतिजन विशिष्टता	98.07%

एप्लिकेबल फॉर	बोवाइन
सॅम्पल टाईप	होल ब्लड, सीरम
स्टोरेज	4-28 Deg cent
पॅकिंग	सिंगल यूज टेस्ट किट (किमान ५ किट)

## चाचणीसाठी नमुना कसा घ्यावा :

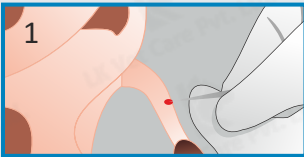


1 शेपटी मधून 2-3 मिली रक्त घेणे

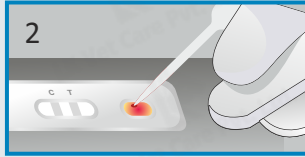

2 रक्ताचे 3 थेंबे कॅसेट मध्ये घाला



3 नमुन्यात 2 थेंबे डायल्युएंट टाका

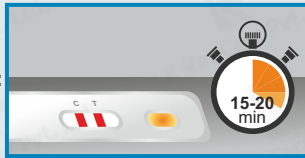

परिणाम केवळ 15-20 मि. मिळतो

## परीक्षण व्याख्या :



पॉझिटिव्ह



नेगेटिव्ह



इनव्हॅलिड



न्यू कॅसेट

## चाचणी किट मध्ये समाविष्ट गोष्टी :

रॅपिड व्हिज्युअल प्रेग्रन्सी किट - १) चाचणी कॅसेट २) ड्रॉपर ३) ब्लड कलेक्शन ट्यूब ४) ब्लड कलेक्शन नीडल ५) EDTA वायल



**ब्रूसेला टेस्ट किट खरेदीसाठी - संपर्क:** एलके व्हेट केअर प्रा. लि., 3 ए, रचना अॅव्हेन्यू, एफ सी रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे - 9552524949 **येथेही उपलब्ध :** • पंढरपूर पशुलॅब: वक्रतुंड बिल्डिंग, केबीपी कॉलेज चौकाजवळ, वाखरी रोड, पंढरपूर - 8956210651